

www.welbu.ru | www.welbu.com

 **WelbuTech**

Ручной массажер
Maxion

MX-M200



Поздравляем с покупкой ручного массажного аппарата МХ-М200!

Инструкция по эксплуатации обеспечивает
безопасное и удобное использование.

Инструкция включает в себя описание работы массажного аппарата
производства крупной корейской компании **WelbuTech**.



Поясница



Подмышки



Шея



Голени



Спина



Ступни



Предплечья



Живот

 **WelbuTech**
www.welbu.ru www.welbu.com

Содержание

Необходимо знать перед использованием.....	3
Перед началом работы.....	4
Меры предосторожности.....	5
Основные правила эксплуатации.....	6
Подходящее время и методы использования.....	7
Возможные неисправности и методы их устранения.....	7
Комплектация.....	8
Особенности массажных насадок и их применение.....	8
Технические характеристики.....	9
Гарантийный талон.....	10
Условия гарантии.....	11

Необходимо знать перед использованием

WelbuTech Maxion MX-M200 – это проводной массажный аппарат ручного типа с семью различными насадками для массажа тела: ног, ступней, ягодиц, рук, кистей, плеч, шеи и спины.

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под наблюдением и/или будучи проинструктированными касательно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

Во избежание угрозы здоровью следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности при эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, а также за дефекты и неисправности причиной которых явилось несоблюдение пунктов данной инструкции по эксплуатации.

Перед началом работы

1. Распаковка

- Достаньте прибор из коробки и выполните проверку;
- Тщательно осмотрите прибор и комплектующие на предмет механических повреждений;
- Убедитесь в наличии всех комплектующих, указанных в разделе «Комплектация» на странице 8.

2. Обратите внимание перед использованием

- Перед использованием этого прибора необходимо прочитать все инструкции и предупреждения. Аппарат необходимо применять только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если вы уже получаете лечение;
- Не пользуйтесь устройством более 20 минут подряд и более 3–4 раз в сутки. Для вашего удобства устройство автоматически заканчивает процедуру через 20 минут после начала массажа.

3. Подготовка к работе.

- Убедитесь, что ваш источник питания соответствует характеристикам массажного аппарата: 220–240 В, 50/60 Гц;
- Вставьте шнур питания в розетку.

Внимание!

Пожалуйста, перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если вы состоите у него на учете или чувствуете недомогание, а также если имеются симптомы и болезни, перечисленные ниже:

- Психические расстройства;
- Злокачественные опухоли;
- Повышенная температура тела;
- Бактериальные, вирусные и грибковые инфекции;
- Нарушение равновесия;
- Патологии позвоночного столба;
- Ревматические заболевания: остеоартроз, подагра, остеопороз;
- Переломы, травмы, раны и нагноения в массируемой зоне;
- Кожные заболевания;
- Частые мышечные спазмы в икрах и бедрах;
- Сердечная недостаточность;
- Заболевания почек и мочевыделительной системы;
- Тромбоз и тяжелые формы варикозного расширения вен;
- Электронные медицинские имплантированные приборы.

Меры предосторожности


- Используйте аппарат только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Не используйте другие аппараты совместно с этим устройством;
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания (невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током);
- Напряжение сети должно составлять 220–240 В (в противном случае есть опасность поражения электрическим током или выведения аппарата из строя);
- Не ставьте тяжелые предметы на прибор, не роняйте его с высоты и не подвергайте ударам;
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены (это может привести к удару электрическим током или пожару);
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью и температурой;
- Не рекомендуется использовать прибор более 20 минут подряд и более 3–4 раз в день одному человеку. Любое чрезмерное или длительное использование может вызвать появление синяков и/или болезненных ощущений;
- Прибор может не функционировать при низких температурах и должен находиться в помещении с комнатной температурой в течение минимум 2-х часов перед началом любых действий;
- Проводите процедуры и храните устройство вдали от детей и домашних животных;
- Этот аппарат предназначен для использования только людьми;
- Не используйте прибор в помещениях с легковоспламеняющимися и/или взрывоопасными жидкостями, газами;
- Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током и аннулированию гарантии;
- Во время использования массажного аппарата мышцы массируемой части тела должны быть расслаблены. Несоблюдение этого требования может привести к травме или повреждению прибора;
- Если вода попала на устройство случайно или вы получили травму, немедленно прекратите его использование и отключите от сети;
- Если аппарат был поврежден, немедленно прекратите использование и отключите его от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр;
- Не тяните вилку из розетки за шнур. Это может привести к повреждению

- шнура, пожару или неисправности;
- Прибор всегда должен оставаться выключенным, если не используется;
 - Не беритесь за шнур питания или вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током;
 - При отсоединении, держитесь за основной корпус вилки;
 - При передаче прибора другому лицу передайте вместе с ним и инструкцию по эксплуатации;
 - Прибор не предназначен для использования большим количеством людей. Ответственность за использование аппарата в общественном месте лежит на пользователе. В случае возникновения неисправности, аппарат нельзя будет поменять или вернуть, т. к. данное использование не будет покрываться гарантией;
 - Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется использовать аппарат с осторожностью, т. к. давление может оказаться для них слишком сильным;
 - Удаляйте пыль и загрязнения с устройства по мере их возникновения, храните прибор в сухом месте;
 - Не используйте аппарат, если шнур или электрическая вилка повреждены или если розетка неплотно закреплена. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для замены поврежденных частей;
 - Между различными электронными устройствами могут возникать электромагнитные или другие помехи, поэтому рекомендуется использовать данные массажные устройства как можно дальше от других электронных устройств;
 - Массажер следует использовать только с прикрепленной насадкой. Использование массажера без нее ведет за собой потерю гарантии.

Основные правила эксплуатации

1. Переключайте режимы работы в соответствии с мерами предосторожности.
2. Осуществляйте массаж по всему телу, не массируйте долго одну область.
3. Осуществляйте массаж не более чем 20 минут за 1 процедуру.
4. Делайте массаж не чаще 3–4 раз в день.
5. При включении устанавливайте регулятор интенсивности в минимальное положение.
6. Вынимайте вилку из розетки после использования.
7. Не переключайте режимы работы во время массажа.

Подходящее время и методы использования

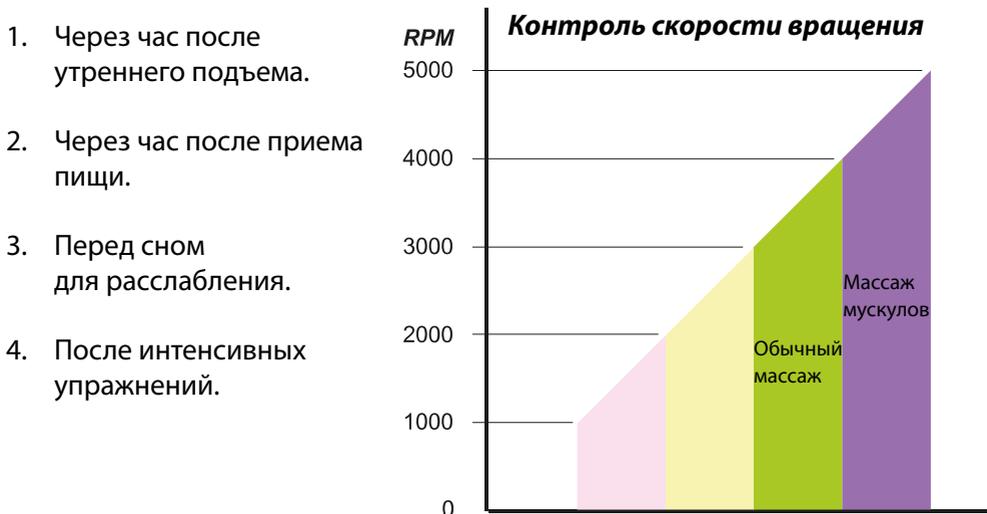

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Аппарат не работает.

- Проверьте, подключен ли аппарат к сети. Если вилка была подключена не полностью, выпала во время работы или не была подключена вовсе, прибор работать не будет. В этом случае необходимо правильно подключить аппарат к сети. Если аппарат был подключен к сети, вытащите вилку из розетки, затем попробуйте подключить заново;
- Если аппарат не работает, несмотря на все попытки, обратитесь в авторизованный сервис-центр компании-поставщика (welbu.ru).


2. Аппарат функционирует некорректно.

- Включите и выключите аппарат, повернув регулятор;
- Если аппарат хранился или доставлен при низкой температуре окружающей среды, он не будет функционировать должным образом. Оставьте его не менее чем на 2 часа при комнатной температуре и только после этого используйте;
- Во время использования может пропасть подача тока в электросети. Это не вызовет поломку;
- В случае, если массажер подключен к сети, соответствующей характеристикам 220–240 В, 50/60 Гц, и насадка соединена правильно, а аппарат не функционирует должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

3. В случае повреждения вилки или шнура питания.

- Не пытайтесь ремонтировать сами, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика (welbu.ru).

Комплектация

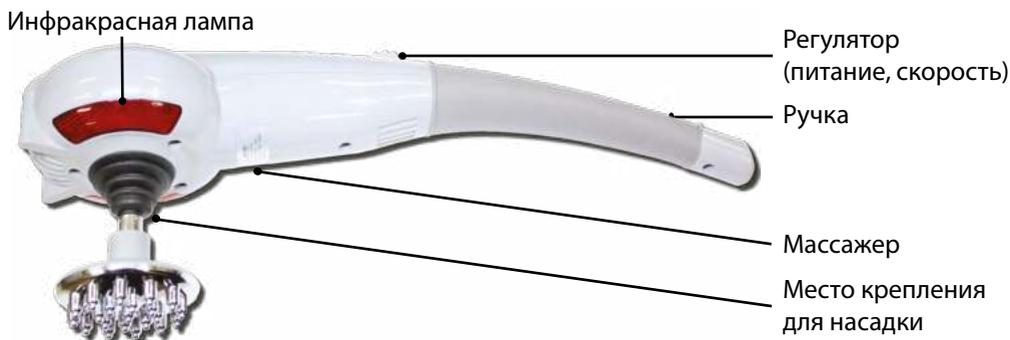

Особенности массажных насадок и их применение



Насадка с 4 головками

4 головки позволяют эффективно массировать широкие части тела: плечо, спину, живот, икры и т. д.



Золотая насадка

Позволяет эффективно прорабатывать зоны естественных изгибов тела: область плеч и шеи.



Серебрянная насадка

Позволяет эффективно прорабатывать зоны естественных изгибов тела: область плеч и шеи.



Насадка-лодочка

Позволяет эффективно прорабатывать зоны естественных изгибов тела: область плеч и шеи.



Насадка с длинными наконечниками

Позволяет эффективно прорабатывать зоны естественных изгибов тела: область плеч и шеи.



Насадка-щетка

Многофункциональная насадка. Подходит для массажа любых частей тела.



Насадка-палец

Подходит для акупрессурного массажа. Имитирует эффект надавливания пальцем – точечного массажа.

Технические характеристики

Тип прибора	Массажер ручной проводной
Торговая марка	WELBUTECH
Модель	Maxion MX-M200
Напряжение / частота сети	220–240 В / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Скорость	5000 об/мин
Насадки для массажа	с четырьмя головками, щетка, палец, лодочка, с длинными наконечниками, «золотая», «серебрянная»
Размеры аппарата	130 мм × 120 мм × 450 мм (Ш × В × Д)
Размеры упаковки	130 мм × 125 мм × 520 мм (Ш × В × Д)
Вес аппарата / с коробкой	1,2 кг / 1,93 кг
Сертификация	EAC, CE, KCC (Korea)
Гарантийный срок	6 месяцев

Изготовитель: «Welbutech Co., Ltd.», Республика Корея, 14, Baekbeom-ro 677 beon-gil, Seo-gu, Incheon

Адрес места производства: Республика Корея, Welbutech Co., Ltd., 14, Baekbeom-ro 677 beon-gil, Seo-gu, Incheon

Тел.: +82 32 870-0900, +82 32 870-0939

Дата производства: см. стикер на корпусе аппарата (формат – месяц ГГГГ)

Импортер: ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделие подлежит сдаче на утилизацию в пункт приема электрического и электронного оборудования.

Гарантийный талон

Чтобы удостовериться, что изделие WelbuTech предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией WelbuTech в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение, обратившись в авторизованный сервис-центр на сайте **welbu.ru**

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте welbu.ru/remont по телефону 8(800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@welbu.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WELBUTECH В РФ:

www.welbu.ru/remont

Модель: Maxion MX-M200

Серийный номер (serial no): _____

Дата продажи: _____
(печать или штамп продавца)

Фирма-продавец: _____

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____
(подпись покупателя)



Информацию о соответствии можно получить на сайте welbu.ru. Срок службы данного изделия равен сроку гарантии и отсчитывается с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажного аппарата WelbuTech. На двигатель и электрические компоненты устройства при домашнем использовании распространяется гарантийный срок в 6 (шесть) месяцев с даты покупки. Гарантийный срок на все аксессуары – 6 (шесть) месяцев. Гарантия распространяется только на брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией WELBUTECH ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с WELBUTECH изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию WELBUTECH – то есть ту, которая была предназначена WELBUTECH для реализации на территории РФ и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры WELBUTECH не осуществляют гарантийную поддержку продукции WELBUTECH, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех сервис-центрах WELBUTECH, контактная информация которых указана в гарантийном талоне на странице 10.



Производитель: WELBUTECH Co., Ltd.

Адрес производителя:

Республика Корея, Бэббом-ро, 14, Бонгиль 677, Сео-гу, г. Инчхон

Сделано в Южной Корее



WelbuTech

Официальный представитель в России

welbu.ru